



Photo du modèle avec option ACCCOUSSIN-01 Coussin 50 x 40cm et option ACCMUL-BPPIEDS: Poignées de poussée rétractables côté pieds

Fauteuil ambulatoire électrique

Gamme MULTIKA Version 2

MULT-V2-65-AM2

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil ambulateur à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande: Télécommande manuelle multifonctions
- Matelas confort monobloc, épaisseur 9cm (6cm de mousse HR35 + 3cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme), largeur 65cm
- Dossier et jambièrre réglables par vérins électriques
- Position de Trendelenburg
- Equipé d'une paire de barrières pleines escamotables avec poignées de déclenchement adaptées et ergonomiques
- Equipé de 4 roulettes diamètre 150mm à freinage centralisé à l'aide de 2 pédales côté pieds et une barre de freinage côté tête
- Barre de poussée côté tête
- Piètement cartérisé pour une hygiène optimale et une sécurité des parties mobiles, coloris gris clair RAL 7035

DIMENSIONS

- Largeur 65cm, largeur hors tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Capacité de charge: 200kg en dynamique

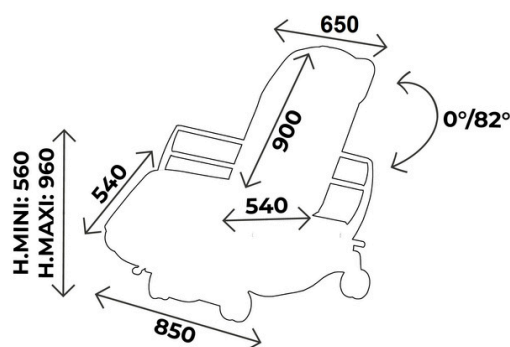

Vous aimerez aussi :

Réf. **MULT-V2-75-AM2**: Idem MULT-V2-65-AM2 mais largeur 75cm



A SAVOIR

- ✓ Délai: 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie: 5 ans (1 an pour la sellerie)


ZOOM
MULT-V2-65-AM2
Avec accessoires



ACCESSOIRES



ACC MUL-BPPIEDS
2 poignées de poussée rétractables
côté pieds

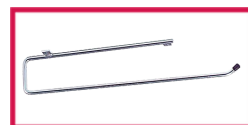

ACC 125
Porte rouleau pour drap d'examen



ACC MULT-320INO1
Tige porte-sérum rétractable,
2 crochets polyamide



ACC COUSSIN-01
Coussin confortable
50 x 40cm



ACC 514-MULT65AM
Protection plastique jambière



ACC MULTIK05-BA2
Tablette lecture et collation



ACC MULTIK30
Pochette pour dossier médical,
fixation dans le dossier



ACC MULTIK08-AM
Porte obus avec sangles de serrage



ACC MULTIK02-PIED
Pédale d'urgence position de
Trendelenburg rapide



ACC BATTERIE01
Batterie rechargeable pour alimenter
le fauteuil lorsque celui-ci n'est pas
relié au secteur



ACC EQUIPOTENT01
Prise d'équipotentialité



ACC MUL-5ROUES
5ème roue pour optimiser les
transferts et la mobilité du fauteuil



ACC ROUE-MOTOR01
Assistance motorisée




ACC MUL-RPIEDS
Repose pieds électrique, non
compatible avec barre de poussée côté
pieds (ACCMUL-BPPIEDS)

COLORIS SELLERIE

Fire retardant
upholstery, M1 class

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme classique et la gamme urban
sans plus value

Revêtement: Sellerie Gamme Classique

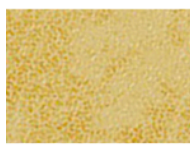

Arno




Garonne




Potomac




Amour

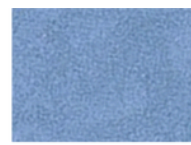


Mississippi

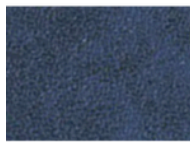


St Laurent

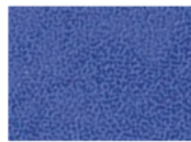

Rhône

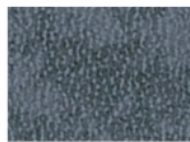

Missouri

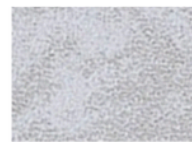

Seine



Amazone

Revêtement: Sellerie Gamme Urban



Abysse



Cendre



Origan




Géranium



Réglisse




Prune

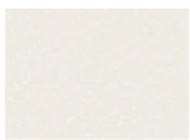

Perle




Ficelle

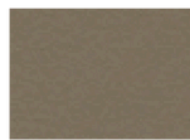


Terre




Béton

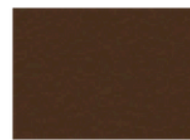

Chataigne

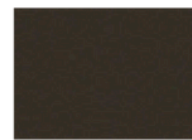

Chocolat

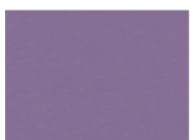

Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny




Absinthe



Ananas



Orange

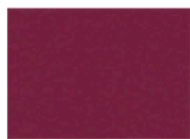

Fuschia



Tomate



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Sellerie : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios ph10 à 0.75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

Piètement : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

Châssis: 5 ans

Sellerie: 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tel: +33(0)4 74 66 69 49
Fax: +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com