



Photo du modèle avec option ACCCOUSSIN-01: Coussin de tête,
ACC150-MULT: 4 roues avec freinage centralisé diamètre 150mm et
ACCMUL-RPIEDS: Repose pieds électrique + coussin

Fauteuil multi fonctions électrique
Gamme MULTIKA Version 2
MULT-V2-65-ME2

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil multifonctions à hauteur variable électrique, 3 parties
- Télécommande manuelle multifonctions avec 2 mémorisations de position (Position accueil assise et position transfert)
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Position de Trendelenburg
- Matelas monobloc, épaisseur 9cm (6cm de mousse HR35 +3cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme)
- Equipé d'une paire de repose bras sur rotule, synchronisée avec le dossier, d'une barre de poussée côté tête et d'une paire de rails DIN 25x10mm pour fixation d'accessoires
- Piètement cartérisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Sur 4 roulettes diam. 125mm avec freinage indépendant

DIMENSIONS

- Largeur 65cm, largeur hors tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Capacité de charge: 200kg en dynamique

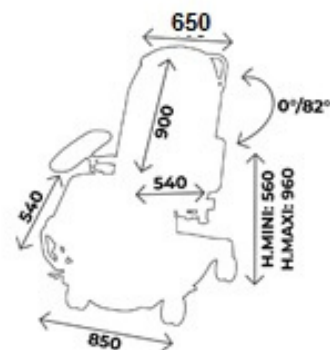

Vous aimerez aussi :

Réf. **MULT-V2-75-ME2**: Idem MULT-V2-65-ME2 mais largeur 75cm



A SAVOIR

- ✓ Délai: 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie: 5 ans (1 an pour la sellerie)

ZOOM MULT-V2-65-ME2 avec accessoires

ACCOUSSIN-01 (option)

Coussin confort 50 x 40cm

Avec barre de poussée

Matelas monobloc
Sellerie avec mousse viscoélastique
pour un confort optimal

Paire d'accoudoirs sur
rotule synchronisés avec le
dossier

Rails DIN 25x10mm
pour fixation accessoires

Télécommande manuelle
multifonctions, fixation à droite
ou à gauche

ACCMUL-RPIEDS (option)

Repose pieds électrique
avec coussin


ACC150-MULT (option)

4 roulettes diam 150mm avec freinage centralisé, 2 pédales à l'avant du fauteuil
et une barre de freinage à l'arrière

ACCESSOIRES



ACC MUL-BPPIEDS
Paire de poignées de poussée rétractables côté pieds

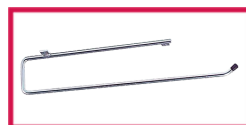


ACC 125
Porte rouleau pour drap d'examen



ACC BATTERIE01
Batterie autonomie de 20 cycles (1 cycle= 1 montée/descente + 1 x montée/descente du dossier)



ACC COUSSIN-01
Coussin confort dimensions 50 x 40cm

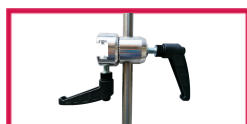

ACC CLAMEDIAM16
Clameau pour fixation sur rail DIN Diamètre 16mm



ACC MULT-320INO1
Tige porte sérum 2 crochets plastiques réglable, sans clameau de fixation



ACC 514-MULT65ME
Protection plastique jambière



ACC MULTIK08-AM
Porte bouteille à oxygène avec sangles de fixation



ACC 150-MULT
4 roulettes diamètre 150mm avec freinage centralisé



ACC-MUL-RPIEDS
Repose pieds électrique avec coussin (non compatible avec paire poignées poussée côté pieds ACCMUL-BPPIEDS)



ACC MULTIK02-PIED
Pédale d'urgence position de Trendelenburg rapide



ACC EQUIPOTENT01
Prise équipotentialité



ACC MUL-5ROUES
5ème roue pour optimiser les transferts et faciliter la mobilité du fauteuil



ACC ROUE-MOTOR01
Assistance motorisée



ACC MULTIK22
Débrayage manuel du dossier

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu classée
M1

*Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme classique et la gamme urban
sans plus value*


Revêtement: Sellerie Gamme Classique




Arno



Garonne

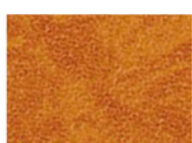

Potomac

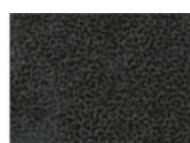


Amour



Mississipi



St Laurent

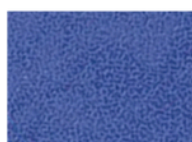

Rhône



Missouri



Seine




Amazone

Revêtement: Sellerie Gamme Urban



Abysse

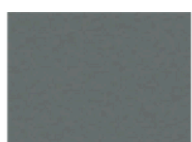

Cendre



Origan




Géranium



Réglisse




Prune

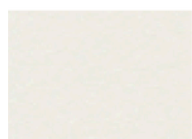

Perle



Ficelle

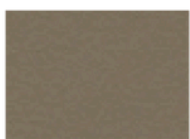

Terre




Béton



Chataigne



Chocolat

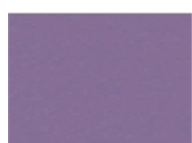

Pensée



Pétrole




Turquoise



Granny



Absinthe

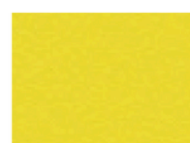

Ananas



Orange



Fuschia



Tomate



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Sellerie : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvaniol ph10 à 0.75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

Piètement : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

Châssis: 5 ans

Sellerie: 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tel: +33(0)4 74 66 69 49
commercial@carinamedical.com